




Ihr Spezialist
für Wasserhygiene

Germlyser[®] neo A

Mehr Freiheit




aqua-free.com



Integrierter
Filter für mehr
Platz unter dem
Wasserhahn

„Ein hocheffektiver
Sterilwasserfilter, ohne
äußerlich als solcher
erkennbar zu sein.“

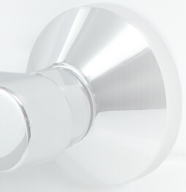

Effektive Steril- filtration auf neuem Niveau

- Membranfilter: Integriert im schwenkbaren Auslass der Armatur
- MetalSkin Medical®: Hochwirksamer Schutz vor retrograder Kontamination
- Standzeit bis zu 8 Wochen
- Nachhaltiges Mehrwegsystem: Kostengünstig und umweltfreundlich
- Schnelle und einfache Installation (Bajonettverschluss)
- Hervorragender Durchfluss auch bei schwierigen Verhältnissen im Leitungssystem

100 % Freiheit

Könnte Ihnen bald die Arbeit erleichtern.
Als technische Innovation integriert sich der
Germlyser® *neo A* in den Wasserhahn.

Er bietet Ihnen hundertprozentigen Freiraum unter dem
Wasserauslass – und garantiert uneingeschränkte
Wasserentnahme und komfortables Händewaschen.
Plus: der Auslaufarm ist schwenkbar, der Adapter ist
in zwei Längen erhältlich. Ohne Verlust in der Nut-
zungshöhe: Effektiver Schutz vor wassergebundenen
Mikroorganismen.



H₂O Hygiene:

Das Robert Koch-Institut (RKI) sieht die Verwendung von endständigen Wasserfiltern als präventive Schutzmaßnahmen in medizinischen Einrichtungen vor.

99,99999 % Rückhalt

Der Germlyser® neo A ist ein **CE**-gekennzeichnetes Medizinprodukt, ein endständiger Sterilfilter mit einer 0,2 µm Hohlfasermembran.

Der Rückhalt von mindestens 7 Log-Stufen¹ nach dem Standard der FDA² bietet Schutz vor bakteriellen, nosokomialen Infektionskrankheiten: Insbesondere hervorgerufen durch kritische wasserassoziierte Keime wie *Legionella pneumophilia*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Stenotrophomonas maltophilia* bzw. *Staphylococcus aureus*.

Der Einsatz des Germlyser® neo A bietet sich in allen medizinischen Einrichtungen, insbesondere in Hochrisikobereichen, an.

Retrograder Schutz

Eine Beschichtung mit dem patentierten antimikrobiellen MetalSkin Medical® an der Strahlscheibe, abgerundete Kanten und ein hygienisches Design sowie bakteriestatisches Material im Gehäuse verhindern eine mögliche retrograde Kontamination (durch verkeimte Aerosole aus dem Abfluss oder Berührung).

Ihre Patienten und Mitarbeiter: Geschützt und sicher.

¹ Gemessen nach dem internationalen Standard ASTM F838-15a - Standard Test Method for Determining Bacterial Retention of Membrane Filters Utilized for Liquid Filtration

² Quelle FDA - Guidance for industry-sterile drug products September 2004



Gut für Ihr Unternehmen, gut für die Ökobilanz

Nachhaltig und umweltbewusst

Für eine Mietpauschale wird Ihnen der hochwertige Mehrwegfilter Germlyser® *neo A* zur Verfügung gestellt.

Dieses Servicekonzept von *Aqua free* läuft wie ein Abonnement, unkompliziert und sicher: Vor Ablauf der Standzeit erhalten Sie neu aufbereitete Filter, auch der gebrauchte Filter wird vom Kurierdienst abgeholt und bei *Aqua free* in einem aufwändigen, validierten Verfahren gemäß RKI-Empfehlung aufbereitet. Der Adapter verbleibt an der Armatur, eingespart wird Kunststoff-Abfall, da nach Standzeit-Ende nur ein regelmäßiger Mehrwegfilter-Wechsel notwendig ist.

Dieser Filterwechselservice ist weltweit einzigartig.



Einfache Installation

Mit nur wenigen Handgriffen ist der Germlyser® *neo A* installiert und kann sofort eingesetzt werden.



Zugelieferten Adapter mittels Einsteckanschluss in Armatur verschrauben.



Germlyser® *neo A* mittels Bajonettverbindung in Adapter befestigen.

Für alle Selbstwechsler:

Mit unserer firmeneigenen App „HyGenius“ lassen sich Ihre Filterwechsel mit wenigen Klicks effizient und fehlerfrei organisieren.

 HyGenius®

Jetzt die
Wasserfilter-App
downloaden.



Aqua free GmbH

Ist einer der europaweit führenden Serviceanbieter im Bereich der Wasserhygiene und zählt zu den größten europäischen Herstellern von medizinischen und nicht-medizinischen Wasserfiltern. Ursprünglich an einer technischen Universität gegründet, besitzt die Aqua free GmbH eine über 20-jährige Firmenhistorie.



Kontaktieren Sie uns:

Winsbergring 31
22525 Hamburg
Germany

+49 40 468999-90
info@aqua-free.com
aqua-free.com

Alles über das Produkt erfahren:
group.aqua-free.com/neo-a
